

Jetzt verbinden und kostenlos mySugr Pro automatisch aktivieren und von den zusätzlichen Vorteilen profitieren.

- **Bolusrechner** – Insulindosis einfach berechnen lassen
- **Mahlzeitenfotos und Suche** – Blutzuckerverläufe besser verstehen
- **PDF-Reports** – das Tagebuch mit dem Arzt einfacher teilen
- **Blutzucker-Erinnerungen** – keine Messungen mehr vergessen
- **Basalrate für Pumpenträger** – auch im Graphen sichtbar



Jetzt mySugr Tagebuch App herunterladen!



**Sie wollen mehr erfahren?**

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!  
**Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800** (Mo–Fr, 08:00–18:00 Uhr).  
 Oder besuchen Sie unser Onlineportal [www.accu-chek.de/guide](http://www.accu-chek.de/guide)  
 bzw. unsere Facebook-Seite [www.facebook.com/accuchekde](http://www.facebook.com/accuchekde)

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK GUIDE sind Marken von Roche.  
 Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.  
 und jeder Gebrauch dieser Marken durch Roche erfolgt unter Lizenz.  
 © 2017 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)  
 Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
 Sandhofer Straße 116  
 68305 Mannheim

07982607990 © 0217 - 10\_CD

# Accu-Chek® Guide

Das Blutzuckermessgerät, das mit der mySugr Tagebuch App kommuniziert.



Jetzt Blutzuckermessgerät mit der App verbinden und Diabetes leichter managen.

## mySugr App

Die mySugr App begleitet Sie zuverlässig durch den Alltag – und die täglichen Diabetes-Herausforderungen werden fast zur Nebensache. Überall, zu jeder Zeit und sogar mit Spaß.



## Geschätzter HbA1c

Keine bösen Überraschungen mehr. Immer gut vorbereitet zum routinemäßigen Arztbesuch.

## Analyse

Ihre Analyse der letzten 7, 14, 30 und 90 Tage. Erhalten Sie einen tiefen Einblick in Ihre Diabetes-Daten.


## Reports


Ein detaillierter Report ist mit Hilfe von Accu-Chek Guide in wenigen Schritten möglich. Eine perfekte Übersicht für Sie und Ihren Arzt.

## Suche

Super flott nach wichtigen Therapie-Daten suchen. Lebensmittel, Unterzuckerungen, Aktivitäten, HbA1c uvm.

## Accu-Chek Guide und mySugr Tagebuch App verbinden:

- 1 Bevor Sie mit der ersten Blutzuckermessung starten, gehen Sie in die Einstellungen Ihres Smartphones, um Bluetooth  zu aktivieren.
- 2 Öffnen Sie die mySugr App und gehen Sie im Seitenmenü auf „Verbindungen“.

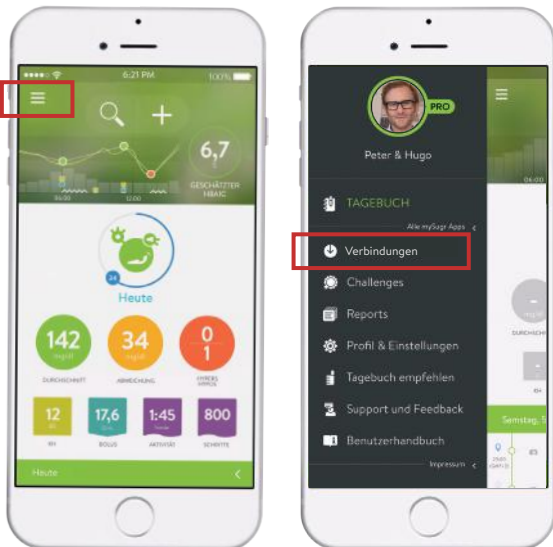

- 3 Wählen Sie Accu-Chek Guide aus und klicken Sie auf „Jetzt verbinden“.



- 4 Schalten Sie das Accu-Chek Guide Blutzuckermessgerät ein und gehen Sie auf „Einstellungen“.
- 5 Wählen Sie „Drahtlos“ aus und bestätigen Sie mit „Ja“, um eine neue drahtlose Verbindung einzurichten.
- 6 Geben Sie den Code, der auf dem Messgerät erscheint, in das Kopplungs-Fenster ein und bestätigen Sie.
- 7 Gehen Sie erneut in „Einstellungen“ auf „Drahtlos“ und aktivieren Sie „Auto-Senden“, um Ihre Blutzuckerwerte künftig automatisch in die mySugr App wandern zu lassen.